



작동 요약 설명서

- ① 회전 속도 키: 모터를 시동합니다/회전 속도를 올립니다.
- ② 냉각수 키: 냉각수 키와 관련하여 2 가지 작동 모드를 설정할 수 있습니다. 설정 모드에 따른 냉각수 기능:
 짧게 누르기 - 냉각수 공급량 활성화/비 활성화하기 또는
 짧게 누르기 - 냉각수 공급량 설정하기 0~110 ml/s (4 단계).
 길게 누르기 - 수동 행굼 기능 활성화하기
- ③ 프로그램 키: 짧게 누르기 - 프로그램 단계 앞으로
 길게 누르기 - 프로그램 단계 뒤로
- ④ 모터 회전 방향 키: 모터 회전 방향을 설정합니다.

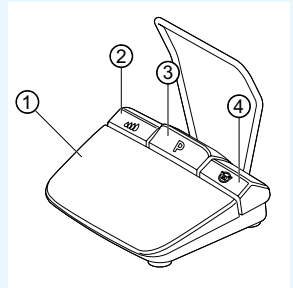

호스 세트 연결

1. 호스 클램프 ⑦을 닫음.
2. 냉각수 호스 ①을 손 또는 엘보우에 고정함.
3. 모터 케이블에 클립 ②를 단단히 고정함.
4. 호스 어댑터 ③을 삽입함.
5. 펌프에 호스 삽입함 (커넥터 및 펌프 입구 ④간 약 1cm 간격, 펌프 잠금).
6. 피어싱 니들 ⑥을 찌름.
7. 호스 클램프 ⑦을 오픈함.

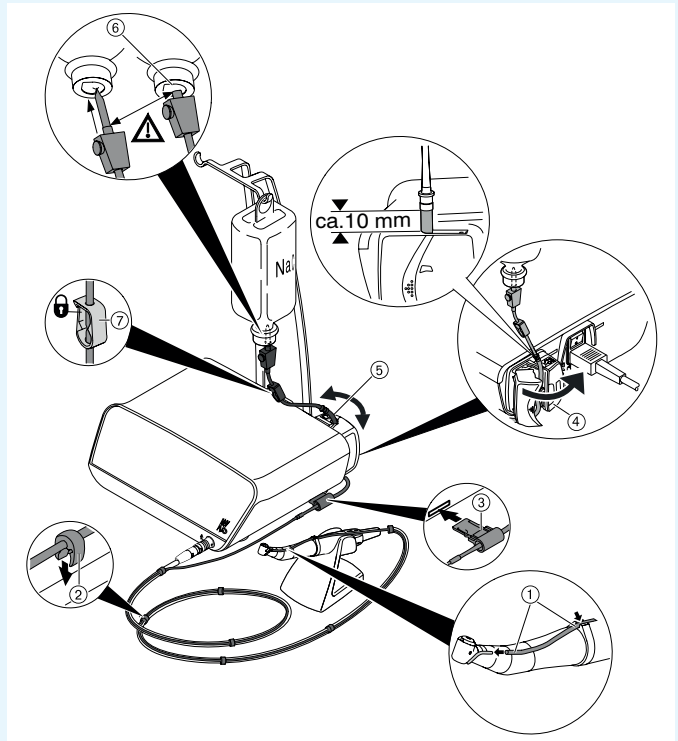

팁


유리병은 피어싱 니들 ⑥ 한 기를 오픈함.



주의

본 작동 요약 설명서는 기본 조작 기능만을 취급함. 처음 사용하기 전이나 익숙하지 않은 자가 작동할 경우에는 함께 제공한 사용 설명서를 반드시 준수해야 합니다.



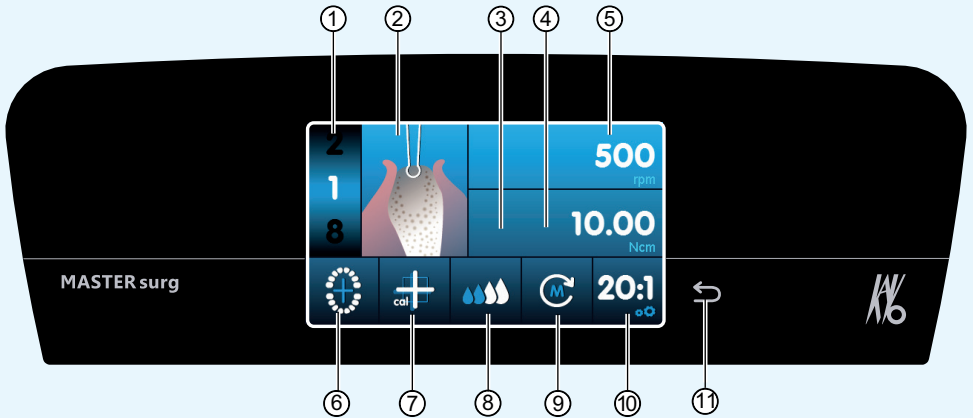

- ① 프로그램 단계 (1 ~ 최대 10)
- ② 액션 설명
- ③ 최대 발생 회전 관성 모멘트 (모든 액션에 표시되지 않음)
- ④ 회전 관성 모멘트 제한값
- ⑤ 회전 속도
- ⑥ 무선 킷 작동 장치 상태 디스플레이 / 입력 임플란트 위치
- ⑦ 원 터치 캘리브레이션 사용
- ⑧ 냉각수 공급량 조절
- ⑨ 모터 회전 방향
- ⑩ 해석
- ⑪ 뒤로 버튼

매개 변수 및 액션 변경

장치 설정 선택

뒤로 버튼 ⑩을 짧게 누르면 진료 프로그램 또는 프로그램 선택이 나옵니다. 길게 누르면 장치 설정을 불러옵니다.

매개 변수 또는 액션 선택/변경

기능 ④ 및 ⑤: 조절기를 왼쪽, 오른쪽으로 이동하거나 +/- 심볼을 눌러 변경함.

기능 ①, ⑧, ⑨, ⑩: 눌러서 변경함.

기능 ②, ⑥ 및 ⑦: 나타난 대화 창 안에서 변경함.

매개 변수나 액션 나오기를 하면 자동 저장됨.

프로그램 단계 수 제한

마지막 선택한 액션 후 프로그램 단계를 누르고 플래그 아이콘을 선택합니다.

프로그램 단계 제한 취소

플래그 아이콘을 이용하여 프로그램 단계를 선택하고 새로운 액션을 할당합니다.

회전력 디스플레이 및 기록

기록 기능에서만 회전력은 „임플란트 설정“ 액션에서 그래픽으로 표시되고 SD 카드에 저장됨.

