



# Kısa kullanım kılavuzu

- ① **Devir sayısı tuşu:** Motoru çalıştırma / Devir sayısını yükseltme.
- ② **Soğutma maddesi tuşu:** Soğutma maddesi tuşu için 2 çalışma modu ayarlanabilir. Çalışma moduna bağlı olarak soğutma maddesi tuşunun sahip olduğu fonksiyonlar:  
Basıp bırakma - Soğutma maddesi besleme miktarını açma/kamapa veya basıp bırakma - Soğutma maddesi miktarını ayarlama: 0 - 110 ml/sn (4 kademe).  
Basılı tutma - Manuel çalkalama fonksiyonu etkinleştirilir.
- ③ **Program tuşu:** Basıp bırakma - Program adımı ileri.  
Basılı tutma - Program adımı geri.
- ④ **Motor dönme yönü tuşu:** Motor dönme yönü ayarı.

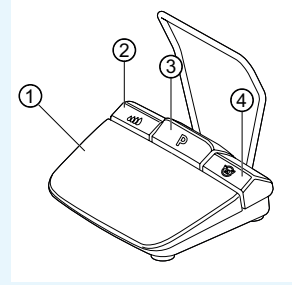

## Hortum setinin bağlanması

1. Hortum kelepçesini ⑦ kapatın.
2. Soğutma maddesi hortumunu ① piyasemene veya anguldruvaya tespitleyin.
3. Klipsi ② mümkün olduğunca sıkı olacak şekilde motor kablosuna tespitleyin.
4. Hortum adaptörünü ③ sabitleyin.
5. Hortumu pompaya yerleştirin (konnektör ile pompa girişi ④ arasında yaklaşık 1 cm mesafe olmalıdır).
6. Geçmeli pimi ⑥ takın.
7. Hortum kelepçesini ⑦ açın.

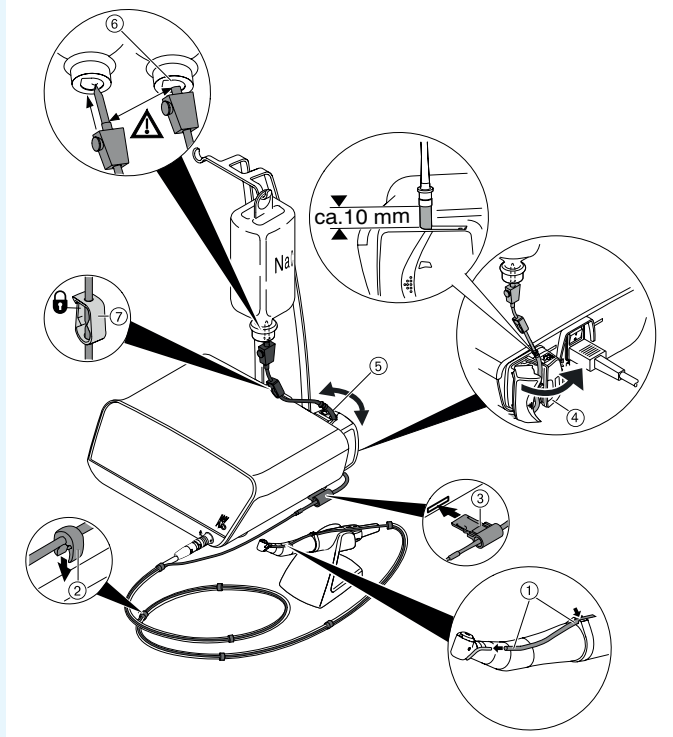

### Bilgi


Geçmeli pimdeki ⑥ havalandırmayı sadece cam tüp-lerde açın.



## DİKKAT

Bu kısa kullanım kılavuzu, sadece önemli kullanım fonksiyonlarına ilişkin tanımları içermektedir. Bu tıbbi ürünün kullanımına hakim olmayan kişiler tarafından ilk işleme alma uygulaması öncesi ve kullanım sırasında, teslimat kapsamına dahil kullanım kılavuzu mutlak şekilde dikkate alınmalıdır.



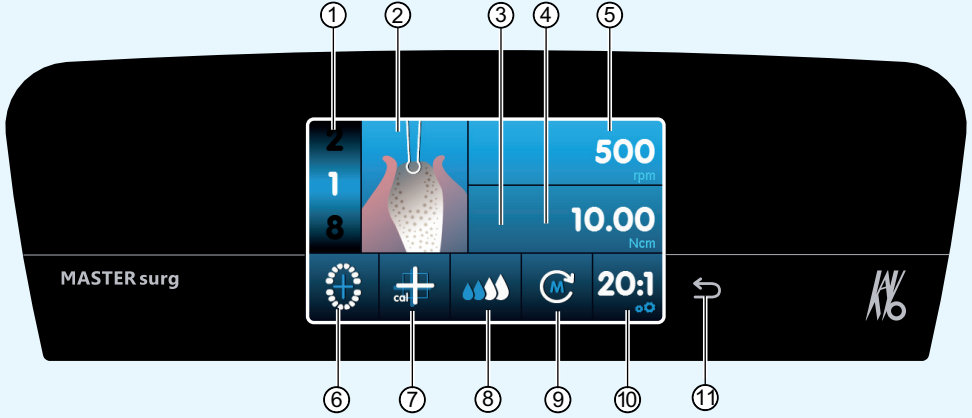

- ① Program adı (1'den en fazla 10'a kadar)
- ② Etkinlik gösterimi
- ③ Oluşan maksimum tork (tüm etkinliklerde gösterilmez)
- ④ Tork sınırlaması
- ⑤ Devir sayısı
- ⑥ Kablosuz kontrol pedalı durumu göstergesi / implant pozisyonu girişi
- ⑦ One-Touch kalibrasyonunu etkinleştirme
- ⑧ Soğutma maddesi besleme miktarı ayarı
- ⑨ Motor dönme yönü
- ⑩ Aktarma oranı
- ⑪ Geri tuşu

## Parametrelerin ve etkinliğin değiştirilmesi

### Cihaz ayarının seçilmesi

Cerrahi programına veya program seçme bölümüne ulaşmak için geri tuşunu ⑪ basıp bırakın. Cihaz ayarlarını açmak için tuşu basılı tutun.

### Parametrelerin ve etkinliğin seçilmesi veya değiştirilmesi

Fonksiyonlar ④ ve ⑤: Sürgünün sağa veya sola doğru kaydırılması ile veya +/- sembollerine basılarak değiştirilebilir.

Fonksiyonlar ①, ⑧, ⑨ ve ⑩: Doğrudan üzerine tıklanarak değiştirilebilir.

Fonksiyonlar ②, ⑥ ve ⑦: Gösterilen iletişim penceresi dahilinde değiştirilebilir.

Kayıt işlemi, parametreden veya etkinlikten çıkıldıktan sonra otomatik olarak yapılır.

### Program adımları sayısının sınırlandırılması

Son seçilen etkinliğin program adımının üzerine tıklayın ve bayrak sembolünü seçin.

### Program adımları sayısının sınırlandırılmasının iptal edilmesi

Bayrak sembolü program adımını seçin ve bu program adımına yeni etkinlik atayın.

### Tork göstergesi ve dokümantasyon

Tork, sadece dokümantasyon fonksiyonu etkin olduğunda „İmplant yerleştirme" etkinliği altında grafik olarak gösterilir ve SD kartına kaydedilir.

