



Kratko uputstvo za upotrebu

- ① Taster za broj obrtaja: Pokrenuti motor / povećati broj obrtaja.
- ② Taster za rashladno sredstvo: Tasteru za rashladno sredstvo mogu 2 radna moda se dodeli. U zavisnosti od podešenog radnog modusa taster za rashladno sredstvo ima sledeće funkcije:
 Kratak pritisak - uključiti/isključiti količinu transporta rashladnog sredstva ili
 kratak pritisak - podešavanje količine transporta rashladnog sredstva od 0 do 110 ml/s (4 stepena).
 Dug pritisak - aktivacija manuelne funkcije ispiranja.
- ③ Programski taster: Kratak pritisak - sledeća faza programa.
 Dug pritisak - prethodna faza programa.
- ④ Taster za smer okretanja motora: Podešavanje smera okretanja motora.

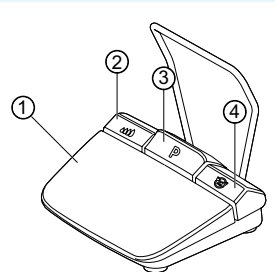

Priključak kompleta creva

1. Stezaljku creva ⑦ zatvoriti.
2. Crevo za rashladno sredstvo ① pričvrstiti na ručni ili ugaoni komad.
3. Stezaljke ② pričvrstiti tesno uz kabal motora.
4. Adapter creva ③ montirati uklopno.
5. Crevo staviti u pumpu (rastojanje oko 1 cm između konektora i ulaza pumpe ④ i zaključati pumpu).
6. Ubosti ubodnu iglu ⑥.
7. Stezaljku creva ⑦ zatvoriti.

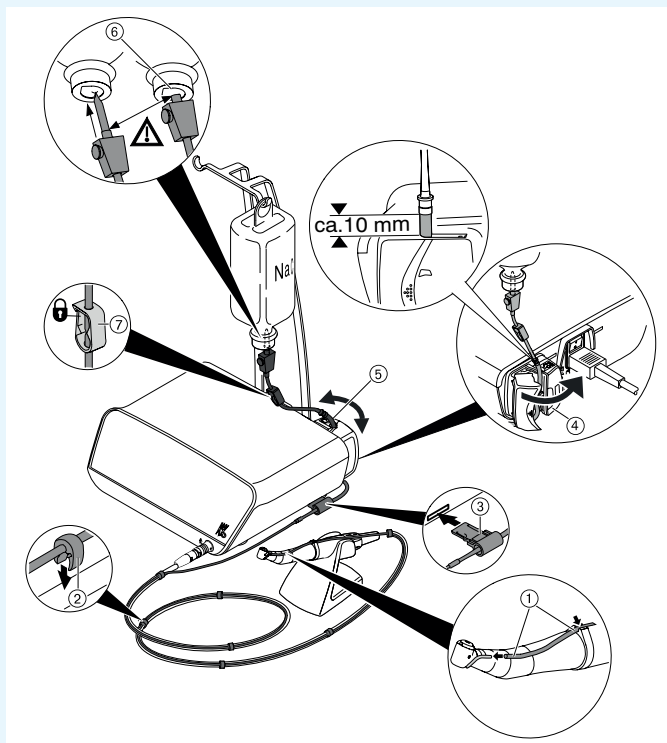

Napomena


Ventilaciju na ubodnoj igli ⑥ otvoriti samo kod staklenih flaša.



OPREZ

Ovo kratko uputstvo za upotrebu sadrži isključivo najvažniji je funkcije za rukovanje. Pre prvog puštanja u rad, kao i kod rukovanja od strane osoba koje nisu upoznate sa ovim medicinskim proizvodom, obavezno se prvo upoznati sa uputstvom za upotrebu koje se isporučuje zajedno s proizvodom.



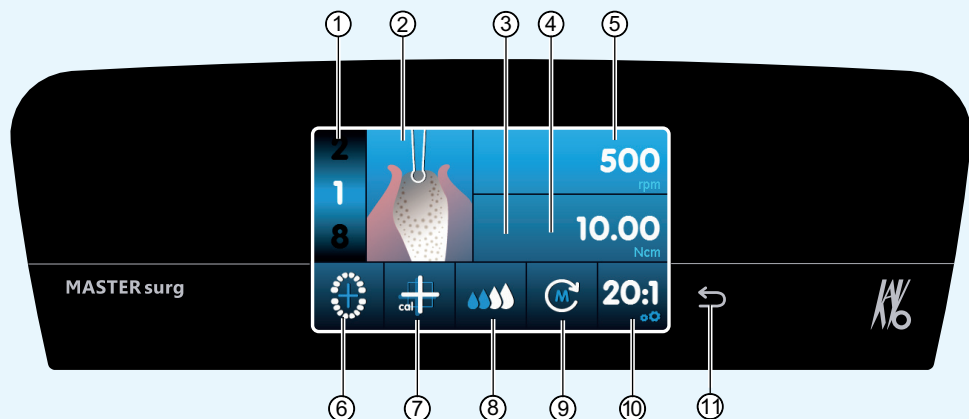

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ① Korak programa (1 do maks. 10) | ⑦ Aktivacija One-Touch-kalibracije |
| ② Prikaz aktivnosti | ⑧ Podešavanje količine rashladnog sredstva |
| ③ Maksimalan obrtni momenat
(ne prikazuje se kod svih aktivnosti) | ⑨ Smer kretanja motora |
| ④ Ograničenje obrtnog momenta | ⑩ Prenos |
| ⑤ Broj obrtaja | ⑪ Taster za nazad |
| ⑥ Indikaor statusa bežičnog nožnog prekidača / unos
pozicije implantata | |

Promena parametara i aktivnosti

Izabrati podešavanje uređaja

Kratko pritisnuti taster za nazad ⑪ radi pristupa hiruškom programu ili izboru programa.

Dug pritisak radi pozivanja podešavanja uređaja.

Izbor, odnosno promena parametara ili aktivnosti

Funkcije ④ i ⑤: Promenljive pomeranjem regulatora na desno ili levo ili pritiskom na +/- simbole.

Funkcije ①, ⑥, ⑨ i ⑩: Direktno promenljive pritiskom.

Funkcije ②, ③ i ⑦: Promenljive u okviru dijaloga koji se pojavljuje.

Snimanje u memoriju izvodi se automatski prilikom napuštanja parametara ili aktivnosti.

Ograničavanje broja koraka programa

Pritisnuti korak programa posle poslednje izabrane aktivnosti i izabrati simbol zastavice.

Ukidanje ograničenja koraka programa

Izabrati korak programa pomoću simbola zastavice i dodeliti novu aktivnost.

Prikaz obrtnog momenta i dokumentacije

Obrtni momenat se pojavljuje kao grafički prikaz samo kada je uključena funkcija dokumentacije u aktivnosti „Stavljanje implantata“ i snima na SD-karticu.

