



Lühike kasutusjuhend

- ① **Pöörete arvu klahv:** mootori käivitamine / pöörete arvu suurendamine.
- ② **Jahutusaine klahv:** jahutusaine klahvile saab seada 2 režiimi. Olenevalt valitud režiimist on jahutusaine klahvil järgmised funktsioonid.
Lühike vajutus - jahutusaine teisalduskoguse sisse-/väljalülitamine või lühike vajutus - jahutusaine teisalduskoguse reguleerimine, 0 kuni 110 ml/s (4 astet).
Pikk vajutus - manuaalse loputusfunktsiooni aktiveerimine.
- ③ **Programmiklahv:** lühike vajutus - programmisamm edasi.
Pikk vajutus - programmisamm tagasi.
- ④ **Mootori pöörlemissuuna klahv:** mootori pöörlemissuuna reguleerimine.

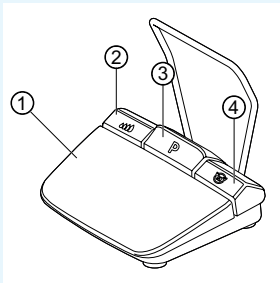

Voolikukomplekti ühendamine

1. Ühendage voolikuklamber ⑦.
2. Kinnitage jahutusainevoolik ① sirg- või nurkotsikule.
3. Kinnitage klipsid ② tihedalt mootorijuhtmele.
4. Fikseerige voolikuadapter ③.
5. Asetage voolik pumba sisse (fikseerige u 1 cm kaugusele konnektori ja pumbasisendi ④ ning pumba vahele).
6. Sisestage sisestusnõel ⑥.
7. Avage voolikuklamber ⑦.

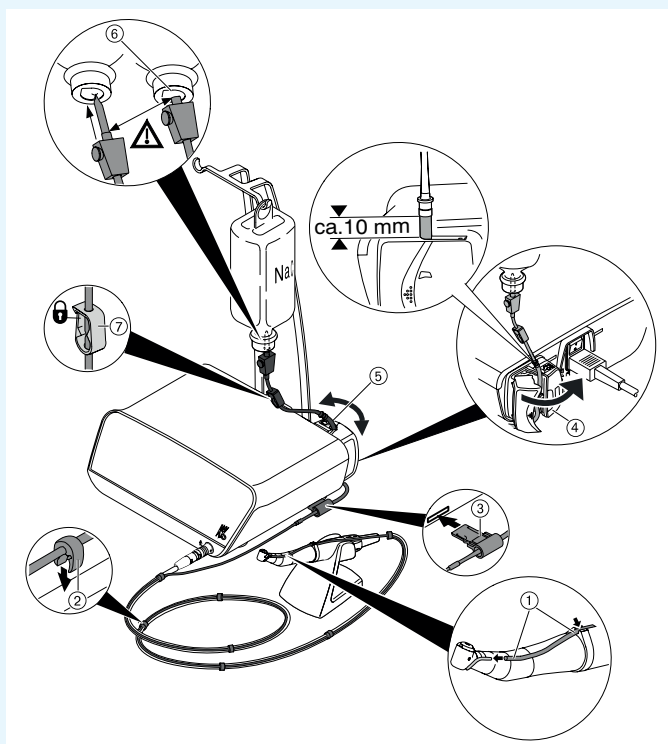

Märkus


Avage sisestusnõela ⑥ juures olev õhutus ainult klaaspudelite korral.



ETTEVAATUST

Lühijuhend sisaldab ainult olulisi kasutusfunktsioone. Enne esimest kasutamist ning kasutamise korral inimeste poolt, kes ei tunne seda meditsiinitoodet, tuleb kindlasti lugeda tarnekomplekti kuuluvat kasutusjuhendit.



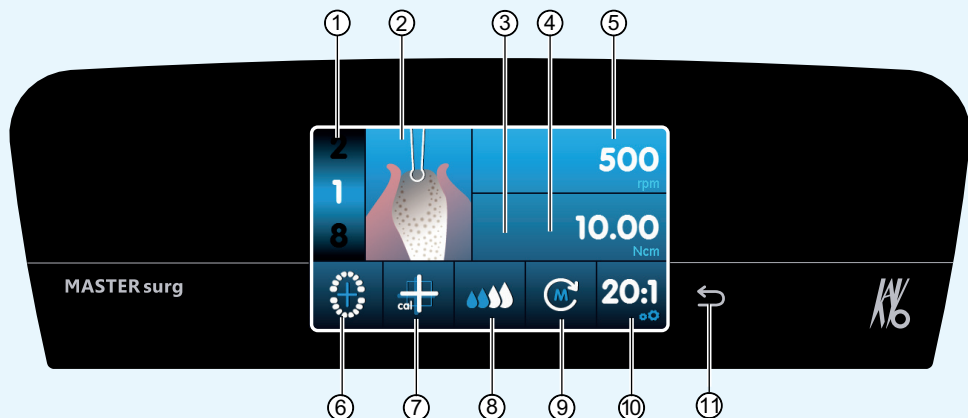

- | | |
|---|--|
| ① Programmisamm (1 kuni max 10) | ⑦ One-Touch-kalibreerimise aktiveerimine |
| ② Tegevuse kujutamine | ⑧ Jahutusainekoguse seadistamine |
| ③ Maksimaalne pöördemoment
(ei näidata kõigi tegevuste juures) | ⑨ Mootori pöörlemisuund |
| ④ Pöördemomendi piiramine | ⑩ Teisendamine |
| ⑤ Pöörete arv | ⑪ Tagasi-nupp |
| ⑥ Raadio-jalgsäiviti olekunäit / implantaadi asukoha
sisestamine | |

Parameetrite ja tegevuste muutmine

Seadme seadistuse valimine

Kirurgiaprogrammi või programmivaliku avamiseks vajutage lühidalt tagasi-liikumisnuppu ⑪.

Seadme seadistuste kuvamiseks vajutage nuppu pikalt.

Parameetri või tegevuse valimine või muutmine

Funktsioonid ④ ja ⑤: saab muuta regulaatori lükkamisel paremale või vasakule või sümbolite +/- vajutamisel.

Funktsioonid ①, ⑧, ⑨ ja ⑩: otse muudetakse vajutamise teel.

Funktsioonid ②, ⑥ ja ⑦: muudetakse kuvatavas dialoogiaknas.

Salvestamine toimub automaatselt parameetrist või tegevusest lahkumisel.

Programmisammude arvu piiramine

Vajutage pärast viimati valitud tegevust programmisamm ja vajutage lipusümbolit.

Programmisammude piirangu tühistamine

Valige lipusümboliga programmisamm ja määrake uus tegevus.

Pöördemomendinäidik ja dokumenteerimine

Toimingu „Implantaadi paigaldamine“ ajal kuvatakse pöördemomendi diagrammina ja salvestatakse SD-kaardil vaid juhul, kui dokumenteerimis-funktsioon on sisse lülitatud.

